


Triodo a gas D 1000653

Istruzioni per l'uso

10/15 ALF

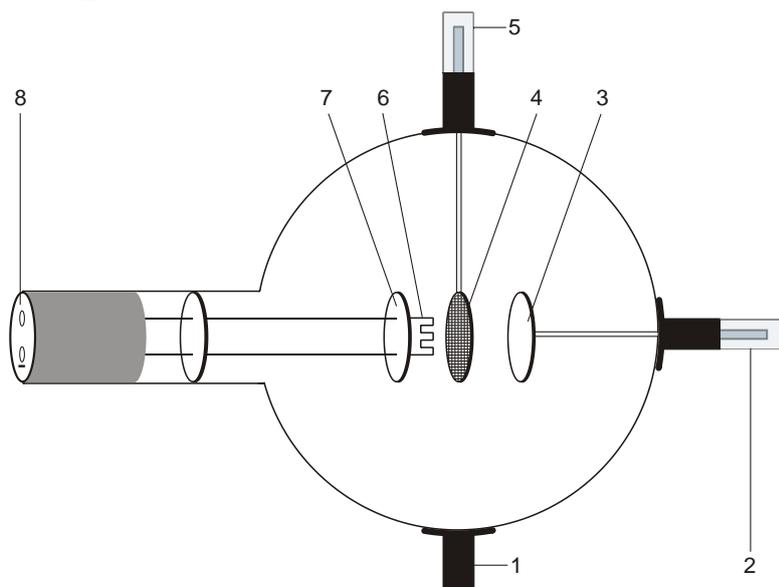

- 1 Supporto
- 2 Spinotto da 4 mm per il collegamento dell'anodo
- 3 Anodo
- 4 Reticolo
- 5 Supporto con spinotto da 4 mm per il collegamento del reticolo
- 6 Spirale riscaldante
- 7 Piastra catodica
- 8 Connettore da 4 mm per il collegamento di riscaldamento e catodo

1. Norme di sicurezza

I tubi catodici incandescenti sono bulbi in vetro a pareti sottili, sotto vuoto. Maneggiare con cura: rischio di implosione!

- Non esporre i tubi a sollecitazioni meccaniche.
- Non esporre i cavi di collegamento a sollecitazioni alla trazione.
- Il tubo può essere utilizzato esclusivamente con il supporto D (1008507).

Durante il funzionamento dei tubi, possono essere presenti tensioni e alte tensioni che rendono pericoloso il contatto.

- Eseguire i collegamenti soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.

Tensioni e correnti eccessive e temperature catodiche non idonee possono distruggere i tubi.

- Rispettare i parametri di funzionamento indicati.
- Durante il funzionamento il collo del tubo si riscalda.
- Se necessario far raffreddare i tubi prima di smontarli.

Il funzionamento per un periodo prolungato con intensa scarica di gas può causare l'erosione del materiale dell'elettrodo, che si deposita sull'ampolla oscurandola.

Il rispetto della Direttiva CE per la compatibilità elettromagnetica è garantito solo con gli alimentatori consigliati.

2. Descrizione

Il triodo a gas consente la registrazione della caratteristica $I_A - U_A$ di un tiratron, l'osservazione delle scariche dipendenti e indipendenti, nonché l'osservazione dell'emissione di energia discontinua di atomi di elio durante l'urto anelastico contro elettroni liberi.

Il triodo a gas è un tubo riempito di elio con un filamento caldo (catodo) in tungsteno puro, una piastra metallica circolare (anodo) e un reticolo metallico intermedio posto in un'ampolla di vetro trasparente. Catodo, anodo e reticolo metallico sono disposti parallelamente tra loro. Questa forma costruttiva planare corrisponde al simbolo del triodo tradizionale. Una piastra metallica circolare fissata ad una delle guide del filamento caldo consente di ottenere un campo elettrico più uniforme tra catodo e anodo.

3. Dati tecnici

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Gas: | Elio |
| Tensione di riscaldamento: | $\leq 7,5$ V CA/CC |
| Tensione anodica: | max. 500 V CC |
| Corrente anodica: | solitamente 10 mA a $U_A = 300$ V |
| Tensione reticolo: | max. 30 V |
| Ampolla: | ca. 130 mm \varnothing |
| Lunghezza totale: | ca. 260 mm |

4. Utilizzo

Per l'esecuzione degli esperimenti con il triodo a gas sono inoltre necessari i seguenti apparecchi:

| | |
|----------------------------------|---------|
| 1 Portatubo D | 1008507 |
| 1 Alimentatore CC 500 V (@115 V) | 1003307 |
| oppure | |
| 1 Alimentatore CC 500 V (@230 V) | 1003308 |
| 2 Multimetro analogico AM50 | 1003073 |

In aggiunta si consiglia:
Adattatore di protezione bipolare 1009961

4.1 Inserimento del tubo nel portatubi

- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Spingere completamente all'indietro il dispositivo di fissaggio del portavalvole.
- Inserire il tubo nei morsetti.
- Bloccare il tubo nei morsetti mediante i cursori di fissaggio.
- Se necessario, inserire un adattatore di protezione sui jack di collegamento del tubo.

4.2 Rimozione del tubo dal portatubi

- Per rimuovere il tubo, spingere di nuovo all'indietro i cursori di fissaggio e rimuoverlo.

5. Esperimento di esempio

5.1 Scarica, dimostrazione dei portatori di carica positivi

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 1.
- Per dimostrare i portatori di carica positivi (ioni He^+) durante la scarica di gas a tensione di riscaldamento massima U_F , misurare la corrente I_G rispettando la polarità.

5.2 Scarica dipendente

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 2.
- Registrare la caratteristica $I_A - U_A (= U_G)$ per tensioni di riscaldamento differenti U_F (5 V ... 7,5 V).

A circa 25 V aumenta la corrente anodica I_A nel triodo a gas. Tale aumento è accompagnato da una luce blu. Nel trasporto della carica è coinvolto un numero molto maggiore di portatori di carica rispetto al triodo ad alto vuoto (oltre a elettroni termici anche ioni He^+).

5.3 Scarica indipendente

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 3.
- Aumentare lentamente la tensione anodica U_A e determinare la tensione di innesco U_Z per la scarica di gas.
- Abbassare nuovamente la tensione anodica U_A fino ad arrestare la scarica indipendente. Registrare la tensione di innesco U_L .

5.4 Disposizione Frank-Hertz semplificata

Esperimento per la dimostrazione dell'emissione di energia discontinua durante l'urto anelastico con elettroni di elio. Gli elettroni si muovono in un campo contrario fra reticolo e anodo. Essi raggiungono l'anodo solo se possiedono sufficiente energia cinetica e contribuiscono alla corrente I_A dall'anodo alla massa.

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 4.
- Ad una forza controelettromotrice U_R di 6 V aumentare lentamente la tensione di accelerazione U_B da 0 a 70 V e misurare la corrente anodica I_A .
- Rappresentare graficamente la corrente anodica in funzione della tensione di accelerazione.

Fino ad una tensione di accelerazione di ca. 24 V la corrente anodica aumenta per poi diminuire in modo discontinuo. Ad un ulteriore aumento della tensione di accelerazione la corrente torna nuovamente ad aumentare, per poi decrescere ancora dopo ca. ulteriori 20 V.

Durante la corrente anodica devono essere chiaramente rilevabili 2 valori massimi. In caso contrario abbassare leggermente la tensione di riscaldamento.

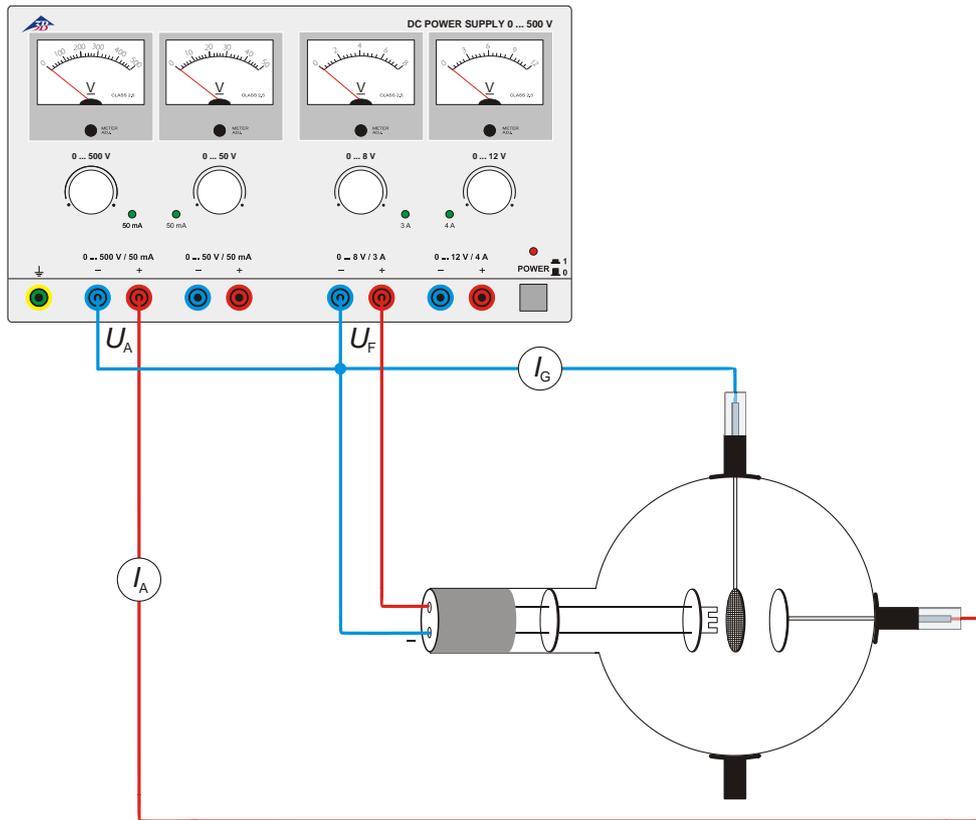


Fig. 1 Dimostrazione dei portatori di carica positivi

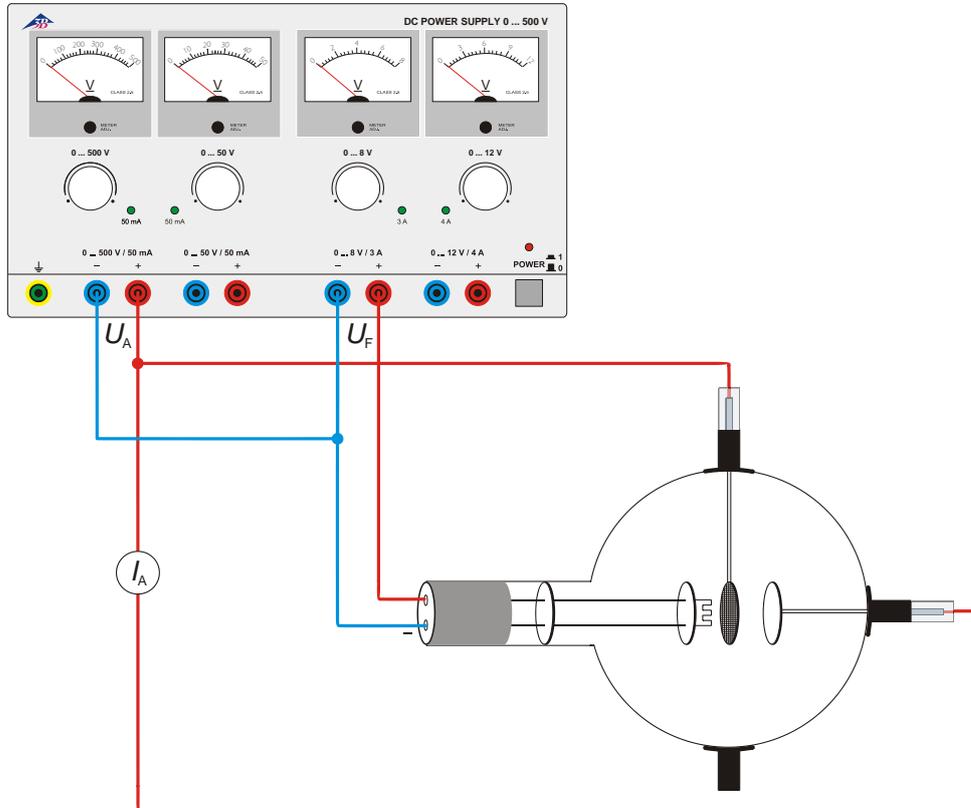


Fig. 2 Scarica dipendente

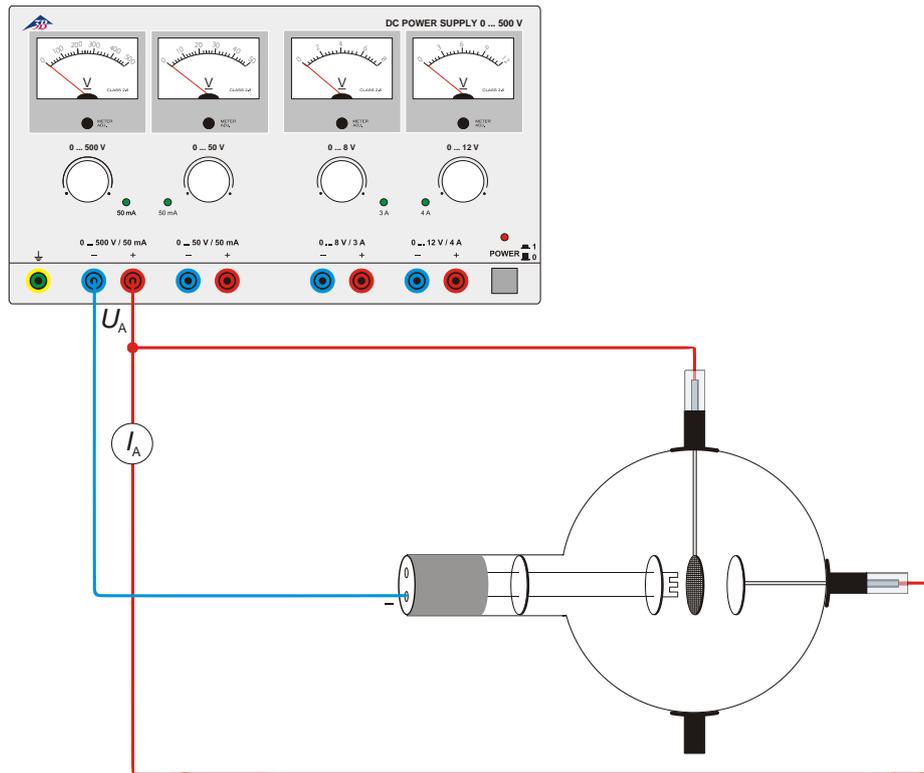


Fig. 3 Scarica indipendente

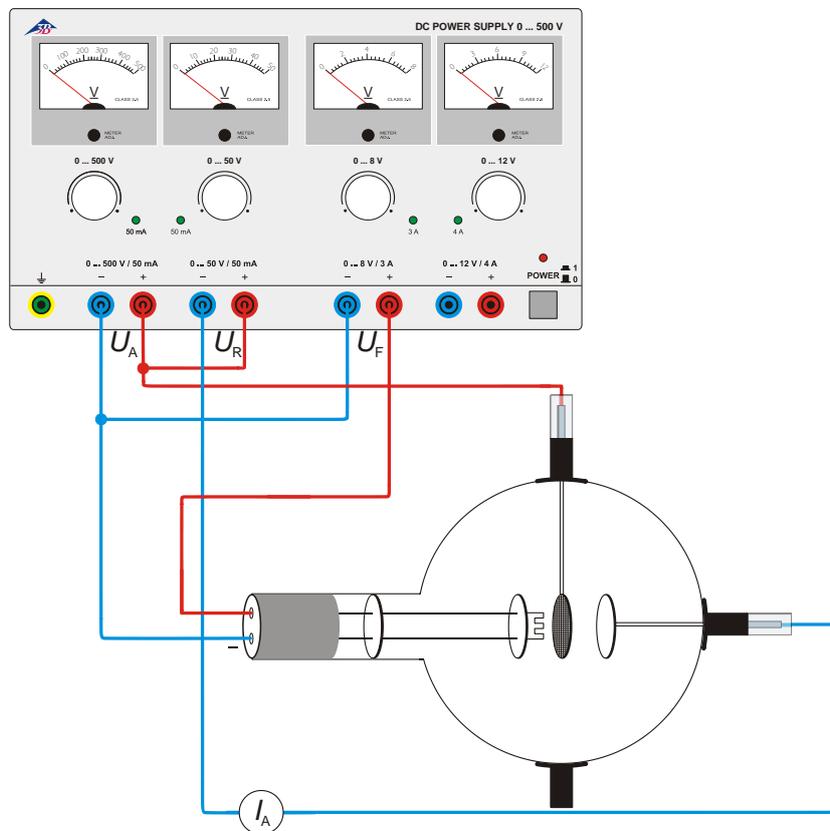


Fig. 4 Disposizione di Franck-Hertz