



**1020628 | P94**

[3bscientific.com](http://3bscientific.com)

Тренажер для изучения стадий родов 3B Scientific

# ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТАДИЙ РОДОВ



## Введение

Вы приобрели Тренажер для изучения стадий родов, который предназначен для демонстрации и практических занятий по теме Стадии родов. В тренажере имеется 6 вставок для пальпации и последующего обсуждения со студентами. Стандарты как элемент профессиональной акушерской подготовки осваиваются и отрабатываются в процессе обучения и текущей клинической практики.

## Комплект поставки

- 6 вставок
- Предохранительная пластина с 4 винтами (для вставки в симулятор родов P90)
- Смазка
- Сумка для переноски



## Функции

В данный комплект входят 6 различных вставок половых органов, которые показывают уровни расширения и сглаживания шейки матки. Вставки можно использовать и как отдельные тренажеры, и как дополнительные модули для [симулятора родов P90](#). Снаружи вставки выглядят одинаково, кодировый номер на задней стороне показывает состояние шейки внутри.

**Вставка № 1**



Закрытая шейка (0,5 см)  
Положение -2

**Вставка № 2**



Шейка раскрыта на 2 см,  
Положение -2

**Вставка № 3**



Шейка раскрыта на 3 см,  
наполовину сглажена  
Положение -2

**Вставка № 4**



Шейка раскрыта на 5 см,  
сглажена  
Положение -1

**Вставка № 5**



Шейка раскрыта на 7 см,  
сглажена,  
Положение -1

**Вставка № 6**



Шейка раскрыта на 9 см,  
сглажена,  
Положение 0

## Сборка

Установка вставок стадий родов:

- При использовании в комбинации с симулятором родов P90 (версии Basic и PRO) в его основной корпус могут быть установлены разные вставки (1-6). Поставьте резиновые ножки симулятора родов на нескользящую поверхность, например на стол.
- Снимите крышку живота.
- Снимите вставку влагалищной части и родовой канал (версия PRO).
- Ослабьте и снимите 4 винта.
- Прикрепите предохранительную пластину (рис. 1) четырьмя встроенными винтами (которые находятся на предохранительной пластине) (рис. 2).

## ТОЛЬКО версия Basic:

- Отрежьте заднюю скрытую застежку (надеваемую на белый штырь) от крышки живота (при обычном использовании ее можно надевать как колпачок во избежание затекания смазки в углубление) (рис. 3).
- Снимите вставку вульвы с крышки живота.
- Прикрепите крышку живота (только возле копчика) (рис. 4).
- Установите желаемую вставку стадии родов в таз с нижней стороны (рис. 5).
- Убедитесь, что вставка прочно защелкнулась на скрытые застежки основного корпуса.
- Полностью закройте крышку живота (рис. 6).



Рис. 1

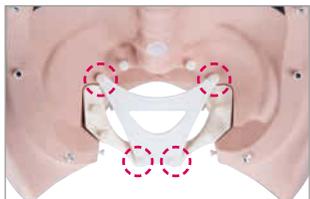


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

# ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТАДИЙ РОДОВ



## Чистка и уход

Поверхность тренажера можно чистить влажной тканью или споласкивать проточной водой. Перед укладкой на хранение убедитесь в полном просушивании частей.



## СОВЕТ

На некоторых частях симулятора родов допускается остаток нанесенной смазки во время частого повторного использования симулятора. Перед началом практических занятий убедитесь в том, что нанесено достаточное количество смазки. На время длительного перерыва в использовании тщательно вымойте все части, прежде чем убирать симулятор на хранение.

## Технические данные

Размеры:

Симулятор (В×Ш×Г): 13 x 11,5 x 13 см

Сумка (В×Ш×Г): 25 x 60 x 23 см

Вес: приближ. 5,6 кг (с учетом сумки для переноски; 4,85 кг без сумки)

Условия эксплуатации:

Температура эксплуатации: от -10 °С до +60 °С

Температура хранения: от -20 °С до +60 °С

## Список расходных материалов

[1020608 / XP90-015 смазка \(2 × 250 мл\)](#)

Также рекомендуется для обучения акушерок и врачей-акушеров

[1020332 | P90B Симулятор родов BASIC](#)

[1020333 | P90P Симулятор родов PRO](#)



**3B Scientific**

Международная группа компаний

ООО «3Б Сайнтифик» 196084, Санкт-Петербург,  
Московский пр., д. 79А лит. А, офис 400  
Телефон (812) 3342223, [sales.spb@3bscientific.com](mailto:sales.spb@3bscientific.com);  
[www.3bscientific.ru](http://www.3bscientific.ru)

© Авторское право 2016 г. Руководство по  
применению и конструкция изделия:  
3B Scientific GmbH, Germany