

Una suite per travaglio e parto costruita su misura per voi



Operative Experience

RealMom	
Parto vaginale 1021404	+ Simulatore di donna a grandezza naturale + Bambino nato a termine + Tablet per l'istruttore + Monitor di visualizzazione paziente
C-Celia	
Estrazione fetale 1021386	+ Simulatore di addome aperto e utero + 1 bambino grande e 1 set di gemelli + Supporta migliaia di parti
Procedure di taglio cesareo 1021392	+ Simulatore di riparazione di incisione addominale e uterina + Addome e utero in gravidanza + Addome flaccido e utero vuoto + 50 inserti addominali e 50 inserti uterini con sacchi amniotici
Parto con taglio cesareo 1021391	+ Simulatore di addome in gravidanza con sistema pressurizzato di sanguinamento e lubrificazione + 5 uteri caricabili + 13 inserti addominali + 1 bambino grande e 1 set di gemelli
Emorragia post-partum 1021387	+ Simulatore di addome aperto con sistema pressurizzato di sanguinamento e lubrificazione + 2 uteri multiuso
Isterectomia d'emergenza 1021389	+ Simulatore di addome aperto con sistema pressurizzato di sanguinamento e lubrificazione + Utero, vescica, ureteri e rappresentazione dettagliata delle arterie uterine

Elenco delle parti di ricambio disponibili


- Inserti per l'incisione uterina per il simulatore di taglio cesareo
1021393
- Inserti addominali e di riparazione (ognuno consente due incisioni e due riparazioni)
1021394
- Uteri sostituibili per l'isterectomia d'emergenza
1021390
- Inserto addominale sostituibile e utero in gravidanza
1021396

SUITE PER TRAVAGLIO E PARTO



L'unica suite completa per travaglio e parto al mondo

Siamo lieti di presentare la prima soluzione integrata per la formazione su travaglio e parto, caratterizzata da **una suite completa di simulatori pienamente operativi e con intervento diretto nel corpo** per il parto, il taglio cesareo e le procedure ostetriche d'emergenza.

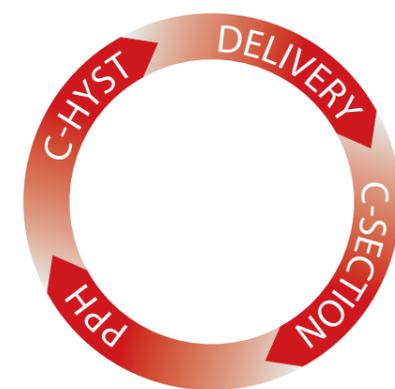

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Amburgo • Germania • 3bscientific.com
Telefono: +49 40 73966-0 • Fax: +49 40 73966-100 • E-mail: info@3bscientific.com

3bscientific.com

La suite per travaglio e parto di Operative Experience

Finalmente, una **soluzione completa e integrata per la formazione** sull'intero percorso di cura per travaglio e parto.

È tempo di lasciarsi alle spalle la tecnologia ormai obsoleta e inaffidabile dei manichini di plastica e scoprire tutte le potenzialità offerte da una simulazione realistica e con intervento diretto nel corpo. I simulatori OEI sono completamente operativi e offrono una sensazione tattile e una fedeltà anatomica senza precedenti con sangue e liquidi realistici. Sono progettati esclusivamente per assicurare agli studenti un'esperienza formativa carica di adrenalina ed estremamente reale.

Inoltre, con OEI non sono necessarie programmazione o impostazioni complicate e tempi di preparazioni lunghi, perché i prodotti sono semplici da utilizzare.

RealMom™




Parto vaginale

Il simulatore di parto vaginale più naturale e realistico del mondo.

- + Parto naturale con canale del parto con tessuto molle attivo
- + Tessuto molle realistico e anatomia interna precisa
- + Simulatore di donna a grandezza naturale e bambino al termine della gestazione con realismo e verosimiglianza senza precedenti
- + Offerta di una gamma completa di procedure utilizzate durante il parto compreso quello assistito con forcipe e ventosa
- + Controllo dell'emorragia post-partum
- + Controllo da parte dell'istruttore della dilatazione e del progresso del parto
- + Presentazione fisiologica e controllo della frequenza cardiaca materna e fetale, toni cardiaci fetali e contrazioni, pulsazioni, pressione arteriosa e SPO₂

C-Celia™

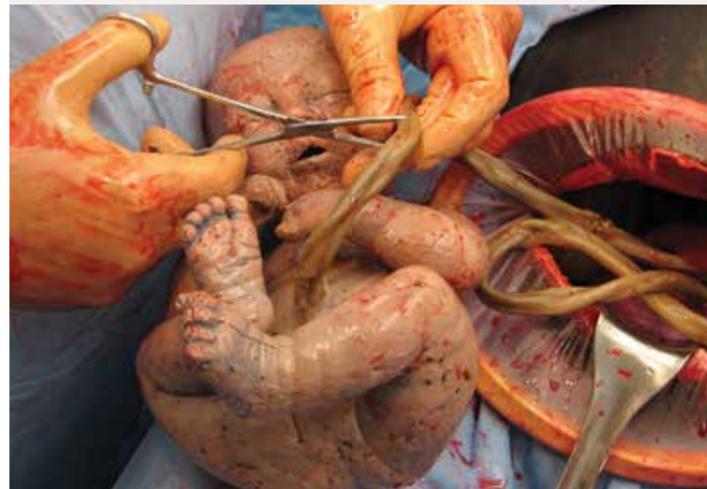

Taglio cesareo

Un sistema di addestramento completo sul taglio cesareo disponibile come una suite completa o in configurazioni personalizzate per soddisfare le esigenze di formazione.

- + Simulatore di estrazione fetale: addome aperto (post-cesareo) per esercitarsi in manovre difficili che prevedono ad esempio l'aspirazione e l'uso del forcipe
- + Simulatore delle procedure di taglio cesareo: simulatore di riparazione addominale e di incisione con addome e utero in gravidanza per esercitarsi nelle incisioni e riparazioni di tessuto
- + Simulatore di parto con taglio cesareo d'emergenza: simulatore di addome in gravidanza che consente un taglio cesareo d'emergenza trasversale o verticale attraverso la parete addominale e l'utero, con bambino, placenta, sistema di lubrificazione pressurizzato e simulazione di liquido amniotico



Emorragia post-partum

Simulatore con addome aperto per praticare varie tecniche di controllo dell'emorragia.

- + Simulatore di controllo dell'emorragia post-partum con sistema pressurizzato di sanguinamento e lubrificazione per riparare lacerazioni complesse e ferite arteriose uterine
- + Addome aperto con utero vuoto, resistente e multiuso che consente svariate procedure prima di essere posizionato
- + Supporta tecniche di controllo dell'emorragia, tra cui palloncino Bakri, sutura di B-Lynch, di Hayman e di O'Leary



Isterectomia d'emergenza

Formazione sulle procedure d'isterectomia post-parto e cesarea che comprende il controllo dell'emorragia e la completa asportazione dell'utero.

- + Addome aperto con sanguinamento e lubrificazione integrata che include un inserto per parete addominale resistente e flaccida, nonché un utero inseribile parzialmente contratto
- + Modello contenente utero, vescica, ureteri e rappresentazione dettagliata delle arterie uterine