



Feedback su BASICBilly+ CPR:

- Profondità delle compressioni
- Frequenza delle compressioni
- Rilascio completo del torace (recoil)
- Volume di ventilazione appropriato
- Tempo di hands-off



FORMAZIONE ALLA RCP BASICBilly+

Il nuovo manichino Basic Life Support BASICBilly+ viene ora fornito con un **feedback diretto** sulla performance della RCP. Il Kit di aggiornamento é costituito da App precise e intuitive basate sulla tecnologia **heartisense®**, che consentono a studenti e istruttori di implementare efficacemente la RCP, ricevendo il feedback diretto della propria performance.

Questo manichino ad alta qualità ed economico **conforme ai requisiti della AHA** è una soluzione completa per la formazione, consentendo di monitorare, analizzare e fare il debriefing sulle prestazioni della RCP. Collegato alla app tramite un'efficiente **connessione Bluetooth**, il manichino non necessita di una rete wireless.

La Instructor App offre una **revisione dettagliata delle performance per un massimo di 6 manichini alla volta**, mentre la Student App permette ai corsisti di vedere direttamente e monitorare le proprie performance durante l'addestramento alla CPR.


IL MANICHINO ECONOMICO ED AFFIDABILE PER L'ADDESTRAMENTO AL CPR CON FEEDBACK DIRETTO COME DA DIRETTIVE DELLA AHA.



*Un'intuitiva **Student Feedback App** monitora ed esamina il miglioramento delle performance*



Salvataggio dei risultati ottenuti dagli studenti e funzionalità di debriefing completa

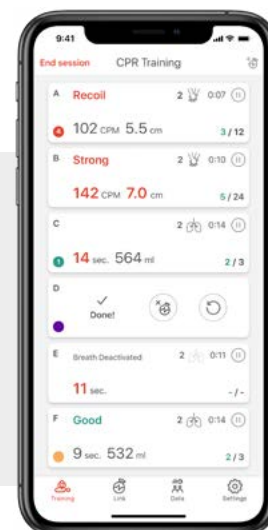

***Instructor App** per monitorare fino a 6 studenti alla volta*

Caratteristiche della CPR App (con il Kit Upgrade):

- Punteggio complessivo e punti di miglioramento della CPR
- Feedback diretto (in tempo reale) e riassuntivo sulla CPR per gli studenti
- Salvataggio dei risultati ottenuti dagli studenti per una successiva analisi
- Esportazione o condivisione dei risultati/certificato degli studenti in formato PDF
- Vista istruttore con possibilità di monitorare fino a 6 manichini alla volta
- Utilizzo da parte dell'istruttore dell'analisi della CPR per un debriefing dettagliato
- Facile passaggio dall'addestramento nella CPR di tipo convenzionale alle impostazioni della CPR "solo per compressione"



BASICBilly+

include un manichino per addestramento e il Kit Upgrade

Pelle più chiara: 8000951

Pelle più scura: 8000953



Hai già un manichino BASICBilly?

Acquista solo il Kit Upgrade per implementare le funzionalità di feedback diretto richieste dalla AHA. L'hardware contenuto nel Kit Upgrade per tutti i manichini BASICBilly Basic Life Support (BLS) è di facile installazione e le app possono essere scaricate dall'App Store.

Contenuto della fornitura del BASICBilly+ Kit Upgrade:

- Kit aggiuntivo con sensore di ventilazione collegato
 - Sacca polmonare con porta sensore di ventilazione
 - Adesivi con ID a colori
 - Guida all'installazione
 - richiede l'uso di 2 batterie "AA" non incluse
- 1022626**



MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE, ALL'INDIRIZZO 3BSCIENTIFIC.COM



Italia **3B Scientific S.r.l.** • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia • 3bscientific.it
Phone: +39 051 79 05 05 • **Fax:** +39 051 469 50 98 • **E-mail:** vendite.italia@3bscientific.com